


MANUAL MICRO-DERMABRASIÓN



INSTRUCCIONES

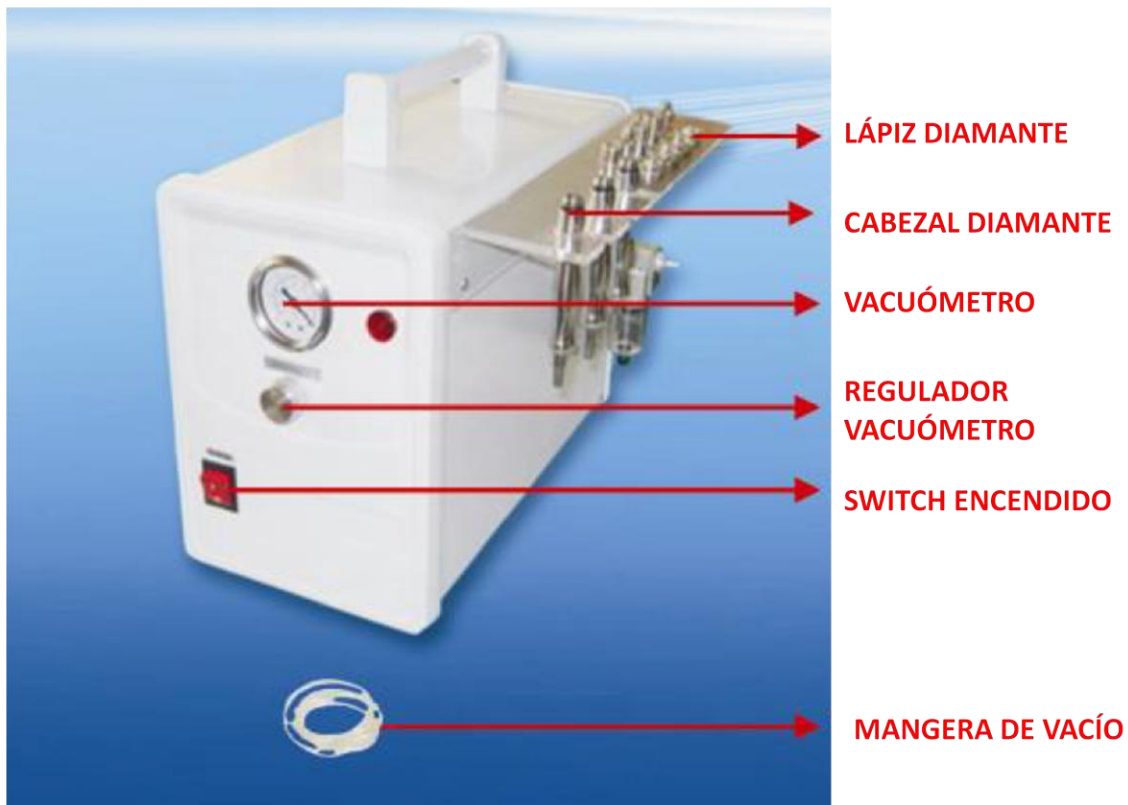

Preparación antes del tratamiento

1. Una consulta incluye un exámen de la piel, un plan de tratamiento.
2. El operador debe usar guantes de vinilo y una máscara facial
3. En la piel grasa o con acné, puede ser utilizado vapor antes del tratamiento, o una loción desengrasante debe aplicarse antes de la limpieza.
4. Limpie la piel con el gel limpiador o agua y luego limpie con un algodón, deje la piel secar.

Instrucciones de servicio para la dermoabrasión

1. Empuje el anillo móvil de la boquilla de cobre en la pieza de mano y tire la Manguera de vacío de 6X4. A continuación, pulse el anillo de plástico negro en la manguera de vacío.
2. Ponga una gota de crema o loción de leche en la boca de la manguera de vacío, presione el anillo móvil e insertar en la manguera de vacío al límite.
3. Inserte un hisopo de algodón en la cabeza del diamante, apretando la cabeza del diamante en la pieza de mano, quitar el hisopo de algodón después de cada tratamiento.
4. Encienda el interruptor de corriente.
5. Ajuste la intensidad de vacío en el regulador de vacío de acuerdo con la tabla en la siguiente referencia, la intensidad de la muestra en el vacuómetro y comprobar con la comodidad del cliente.

Intensidad recomendada de vacío en el área de tratamiento

AREA DE TRATAMIENTO	PIEL NORMAL (EN Hg)	SENSIBILIDAD DE LA PIEL (EN Hg)
Rostro	12-22	8-12
Frente	12-22	10-12
Pecho	15-20	15-18
Nariz	10-15	10-14
Cuello	18-18	10-15
Área de los ojos	8-12	8-10

Tabla de programa de tratamiento


TRATAMIENTO	FRECUENCIA (DIAS)	TOTAL DE VISITAS
Descamación de piel	6-10	3-5
Líneas finas	7-13	6-8
Cuello	12-14	3-5
Cicatrices de acné	7-12	8-10
Hiperpigmentación	7-12	8-10

6. Utilice el área inclinada del cabezal para el contacto con la superficie de la piel, proceda con un movimiento deslizante. No coloque la pieza de mano en un solo lugar por mucho tiempo, hacerlo causará daño a la piel.

7. Ajuste el caudal de cristal por el Regulador de vacío lentamente desde el mínimo hasta el máximo. Para uso común, no ajuste el caudal al máximo a menos que sea por necesidad. Esto es para intensidad más cómoda.

8. Estire suavemente la piel con el pulgar y el índice y deslice el cabezal 2 a 3 veces en la zona a tratar. A continuación, cruzar de nuevo en diferentes direcciones para evitar las líneas como en la imagen de referencia. Trazos de pincel o mociones de pulido se puede usar en diferentes sitios.

ESQUEMA DE LOS MOVIMIENTOS DE PROPUESTAS Y ÁREAS DE DERMABRASIÓN

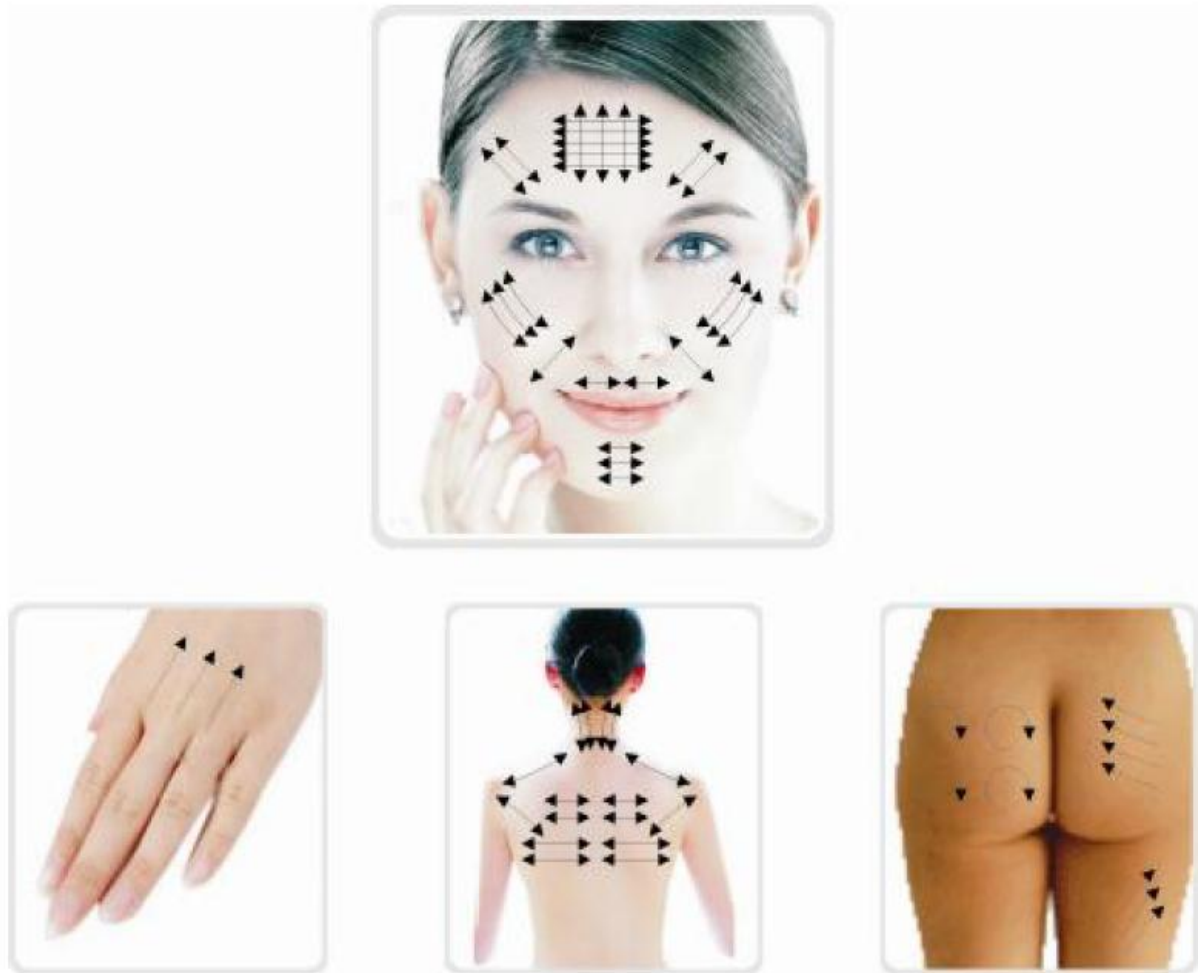

Por favor, siga la dirección de las flechas.

9. Después del tratamiento, sacudir toda la piel muerta que queda con un cepillo suave y enjuagar con esponjas húmedas o toalla húmeda y fría.

10. Permita que la piel se seque y luego aplique el producto deseado en la piel.

11. Para limpiar la cabeza del diamante, utilice un cepillo de dientes o un hisopo de algodón humedecido con un poco de alcohol para limpiar la suciedad, a continuación, utilizar la luz UV o de alta temperatura para la esterilización.

ADVERTENCIA

Aviso Importante de precaución, antes de usar esta máquina:

Nunca opere este equipo sobre una persona que tiene o sufre de las siguientes Condiciones médicas que se describen a continuación / (El operador puede considerar que un cliente firme una renuncia a el sentido de que él / ella está libre de malas condiciones de salud)

1. enfermedad del corazón
2. Soplo cardíaco o ritmo cardíaco irregular
3. Tiene un marcapasos u otro tipo de balanceador de la frecuencia cardíaca.
4. embarazo
5. epilepsia
6. alcoholismo
7. úlceras
8. Enfermedades del estómago, intestino, hígado o páncreas.
9. Cáncer de Mama.
10. Someterse a tratamiento para cualquier tipo de cáncer.
11. Tuvo una cirugía mayor en el último año.
12. asma
13. Resfriado, gripe o malestar estomacal
14. Cualquier enfermedad grave o enfermedad no enumerada anteriormente.

No utilizar en las siguientes áreas:

1. piel Sensible
2. Erupción cutánea
3. La piel dañada, inflamados o infectados.
4. Cicatriz quirúrgica menos de 12 meses.
5. Hinchazón en la piel,
6. Las sondas no pueden apuntar a la bola del ojo.
7. Los genitales.

OBSERVACIONES

1. Siempre comience el tratamiento manteniendo observación en los efectos por el tacto y la apariencia de la piel. Una potencia de vacío que es demasiado alto o demasiado grande puede causar una respuesta inflamatoria.
2. Edema y eritema se puede producir después del tratamiento, pero se resuelven en unas pocas horas.
3. Excesivas técnicas agresivas pueden causar descamación leve durante los 3-4 días siguientes; Epidermis que es tratada demasiado agresiva puede conducir a sangrado en la dermis superficial.
4. La dermoabrasión no debe ser utilizado en áreas sensibles como los párpados. los párpados deben estar cerrados en todo momento durante el procedimiento y puede ser cubierto con algodón húmedo u almohadillas.
5. Las siguientes áreas son considerados inapropiados para el tratamiento: tumor de piel, lunares, marcas de nacimiento, angiomas, los labios, los ojos, herpes, cáncer de piel y manchas del hígado.
6. No modifique ni intente reparar la máquina, póngase en contacto con el técnico de mantenimiento.